

# Das Operations- und Diagnose-Mikroskop SOM 62

Das variable System mit dem sehr breiten Anwendungsbereich



**KARL KAPS GMBH & CO. KG**

Geräte für Medizin und Technik  
Operations- und Diagnosemikroskope



# Das Operationsmikroskop SOM 62 Standard



Die preisgünstige Variante  
für die Erfordernisse der modernen Praxis

Das KAPS SOM 62 Standard ist ein Stereomikroskop mit integrierter Beleuchtung, manuellem 3stufigem Vergrößerungswechsler und 60° Schrägtubus dazu nach Wahl: Rollstativ mit rundem Fuß oder H-Fuß.

Das KAPS Mikroskop-System läßt sich nachträglich mit Zusatzausrüstung zum Mitarbeiten, Mitbeobachten und zur technischen Dokumentation erweitern.

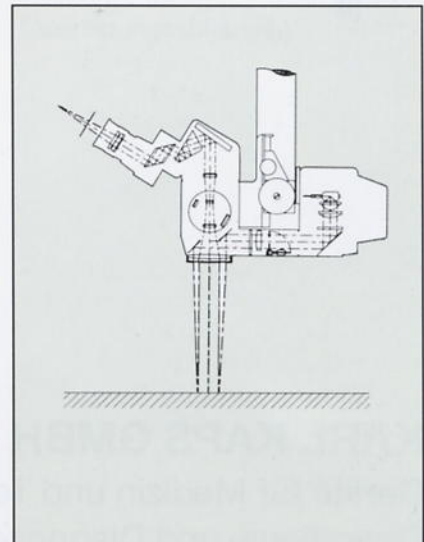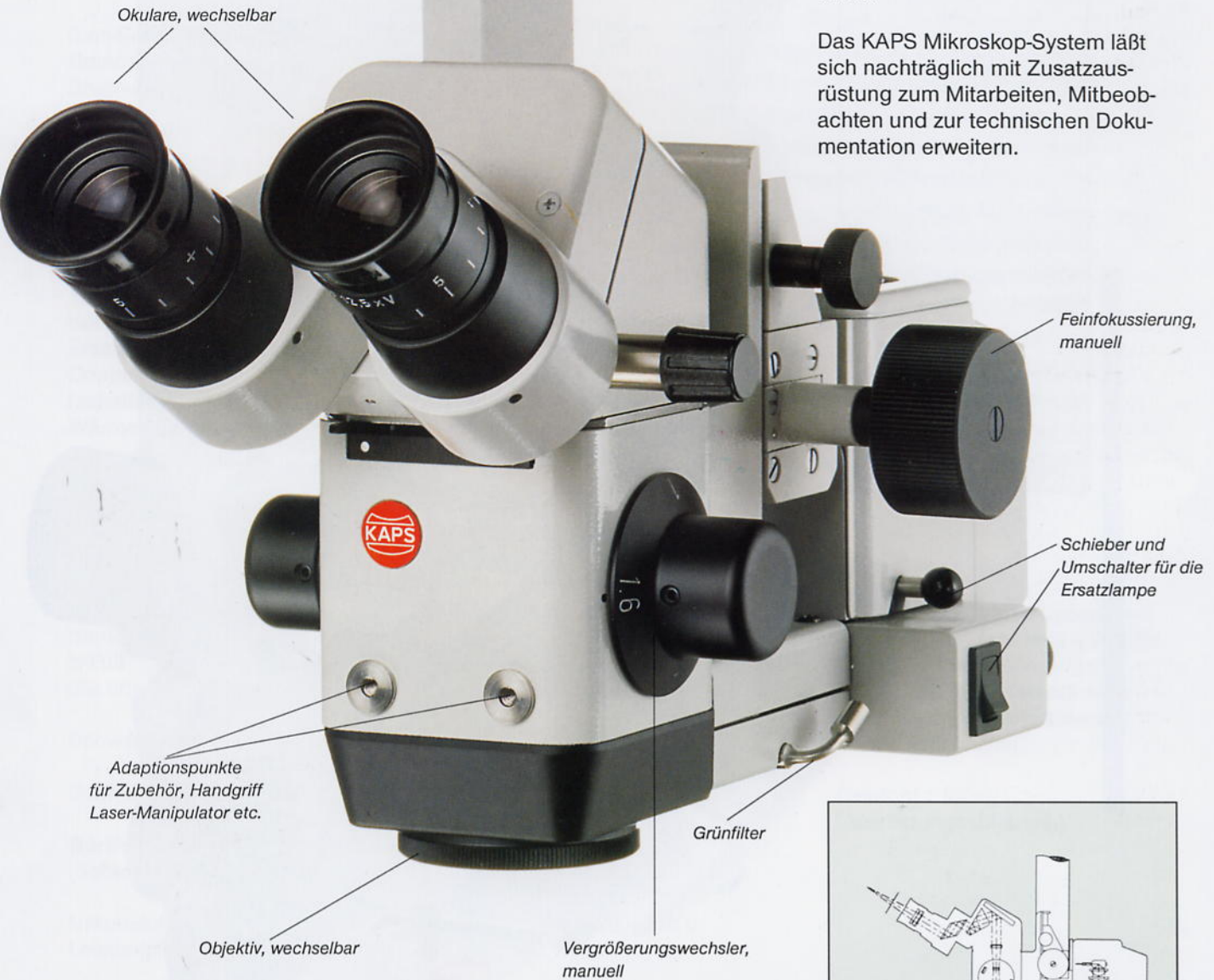

Integrierte Beleuchtung  
mit Doppelstrahlensystem

# Das Operationsmikroskop SOM 62 Kaltlicht Mot



Das vielseitige Gerät mit motorischer Vergrößerungsverstellung und Fokussierung

Die KAPS Stereomikroskope SOM 62 sind hochwertige optische Geräte mit ausgereifter Mechanik, die sich in zeitgemäßem Design präsentieren. Die sehr gute optische Leistung erleichtert die Diagnose und gibt Sicherheit bei Eingriffen. Die beiden zur Auswahl stehenden sehr hellen koaxialen 12 V / 100 W Halogen-Beleuchtungen arbeiten mit einem neuartigen Doppelstrahlensystem, das bei Abschattung eines Strahls, z.B. durch Instrumente ein problemloses Weiterarbeiten gestattet. Die im Mikroskopkopf integrierte Beleuchtung (Standard) und die Lichtleiterbeleuchtung (Kaltlicht) besitzen sofort betriebsbereite Ersatzlampen. 4 Geräteausführungen stehen zur Auswahl, alle können mit manuellen 3 bzw. 5stufigen oder stufenlosen (Zoom) Vergrößerungswechsler ausgerüstet werden. Die elektrische Vergrößerungswahl dagegen ist nur mit dem SOM 62 MOT und dem Motor-Zoom möglich.

- **SOM 62 Standard**

Im Mikroskopkopf integrierte Beleuchtung, Vergrößerungswechsel und Feinfokussierung manuell.

- **SOM 62 Kaltlicht**

Lichtleiterbeleuchtung, Lampe und Ersatzlampe im Schwenkarm, Vergrößerungswechsel und Feinfokussierung manuell.

- **SOM 62 Standard MOT**

Beleuchtung integriert, Vergrößerungswahl (nur Motor-Zoom) und Feinfokussierung elektrisch, mit Fußschalter.

- **SOM 62 Kaltlicht MOT**

Lichtleiterbeleuchtung, Vergrößerungswahl und Feinfokussierung (nur Motor-Zoom) elektrisch, mit Fußschalter.



Das fahrbare Säulenstativ mit höhenverstellbarem Schwebearm kann mühelos an jeden gewünschten Einsatzort geschoben und dort mittels Feststellbremsen sicher plaziert werden.

